

SU SOCIO EN EL ÉXITO DIGITAL,

PaX-i™



CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR

- Imagen óptima para un diagnóstico preciso

DOS SENSORES DEDICADOS

- Sensores especializados para Pano & Ceph
- Flujo de trabajo optimizado y vida útil prolongada de los sensores

SOFTWARE INTUITIVO PARA EL USUARIO, EZDENT-I

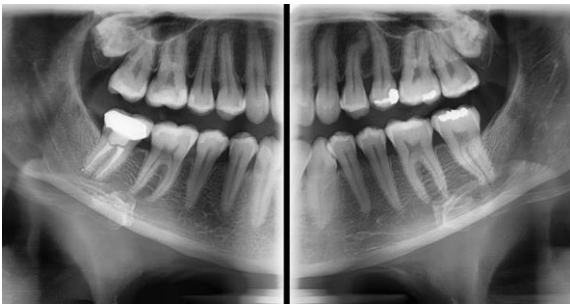
- Solución completa de diagnóstico y consulta

LA SOLUCION AVANZADA DE IMAGENES PARA UN DIAGNOSTICO DENTAL PRECISO

El PaX-i proporciona las imágenes panorámicas más precisas y de alta calidad al combinar el procesamiento de imágenes y la experiencia acumulada en imágenes dentales de Vatech. Esto aumentara su precisión diagnóstica para mejorar la planificación del tratamiento y la satisfacción del paciente.



HAGA SU DIAGNOSTICO FÁCIL Y EFICIENTE CON VARIOS MODOS DE CAPTURA



Modo de Bitewing



Mode de ATM

SELECCION	ARCO	MODO DE EXAMINACION
EXAMINACION DE PANO	Estrecho / Normal Ancho / Nino	Estándar / Derecho / Centro / Izquierdo
	Ortogonal	Ortogonal Estándar / Derecha / Centro / Izquierda Bitewing Estándar / Derecha / Centro / Izquierda
EXAMINACION ESPECIAL	Normal	ATM LAT Abrir / Cerrar ATM PA Abrir / Cerrar Sinus LAT / PA

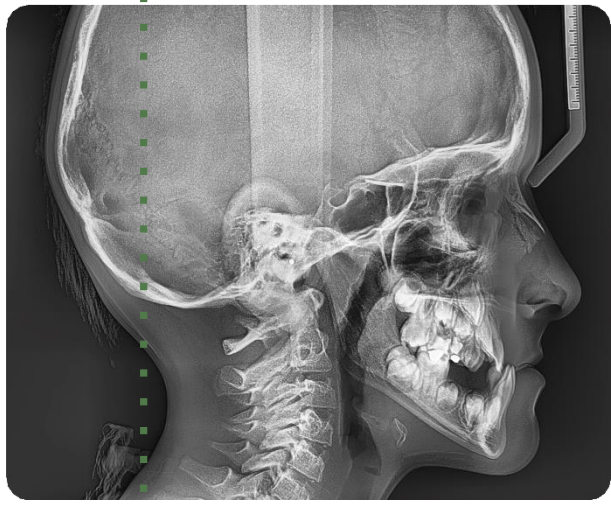
CEFALOMETRICA (SCAN CEPH)

El PaX-i proporciona imágenes óptimas diseñadas exclusivamente para ortodoncia. Hay dos tamaños de imagen disponibles, Lateral y Full Lateral, que le permiten elegir el tamaño de su imagen según sus necesidades de diagnóstico.



LATERAL

Proporciona imágenes especializadas de alta calidad para adaptarse a las cirugías de ortodoncia y maxilofacial.



FULL LATERAL


Un tamaño de imagen lateral completo es un 30% más amplio y muestra el área occipital del paciente, lo que permite un diagnóstico completo.

Programa de Examen	Tiempo de Escaneo	Tamaño de Imagen
LATERAL	12.9 segundos	21x23 cm (8.3"x9.1")
FULL LATERAL	16.9 segundos	27x23 cm (10.6"x9.1")



DOS SENSORES DEDICADOS

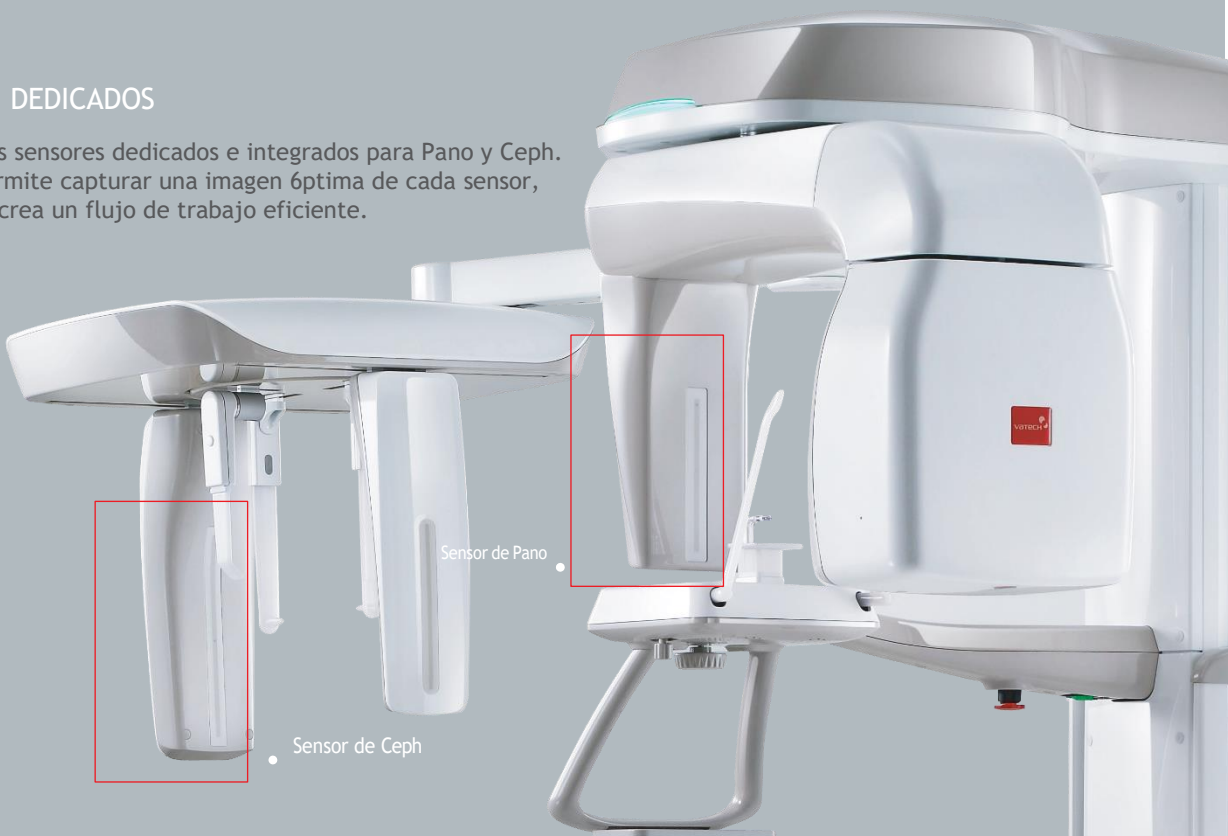El PaX-i ofrece dos sensores dedicados e integrados para Pano y Ceph. Esto no solo le permite capturar una imagen óptima de cada sensor, sino que también crea un flujo de trabajo eficiente.








CONFIGURACION DE PRODUCTO

	PANO	CEPH	
		SCAN	ONE SHOT
PaX-i	•	—	—
PaX-i SC	•	•	—
PaX-i OP	•	—	•

ESPECIFICACIONES(PaX-i : PCH-2500)

Función	Pano + Ceph	Tamaño de FOV de Ceph	SC 21 cm x 23 cm [LAT, PA, SMV, Waters View, Carpus] 27 cm x 23 cm [Full LAT] OP 30.5 cm x 25.4 cm [LAT, PA, SMV, Waters View, Carpus]
Tiempo de Escaneo	Pano: HD 13..5 segundos / Normal 10.1 segundos Ceph : Scan 12.9 segundos / One Shot 0.9 segundos	Escala de Grises	14 bit
Punto Focal	0.5 mm	Posicionamiento del Paciente	De Pie / Accesible para Sillas de Ruedas
Voltaje / Corriente de Cuba	50-90 kVp / 4-10 mA		

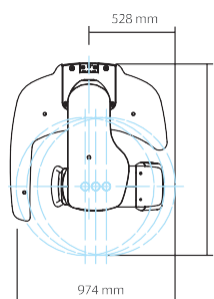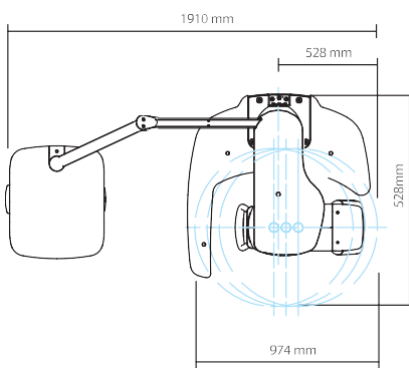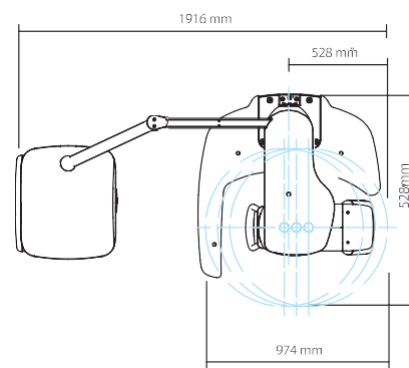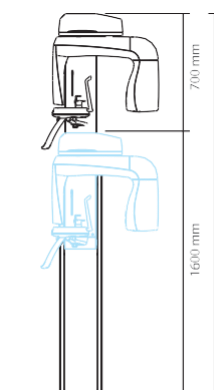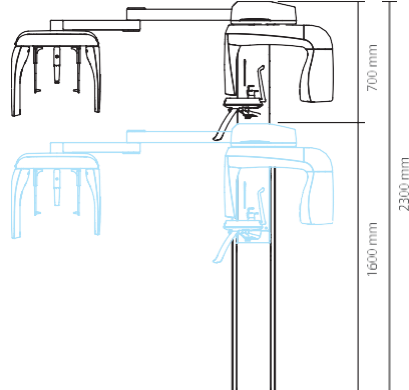DIMENSIONES (Unidad:mm]

PaX-i Pano	PaX-i SC Pano / Scan Ceph	PaX-i OP Pano / One Shot Ceph
VISTA SUPERIOR 	VISTA SUPERIOR 	VISTA SUPERIOR 
VISTA FRONTAL 	VISTA FRONTAL 	VISTA FRONTAL 